



**Stabilisce un nuovo
standard nella valutazione
dell'occhio secco**

 **SBM**
Sistemi
Care and Research


Italian
Xcellence

Il paziente si accomoda lo strumento fa il resto

Nessun operatore richiesto



Guida vocale



**100%
AUTOMATICO**
NESSUN
INTERVENTO
MANUALE




Valutazione con una singola acquisizione.


IDRA X rileva automaticamente l'occhio e avvia una serie completa di valutazioni della superficie oculare e dell'occhio secco.



Novità del prodotto

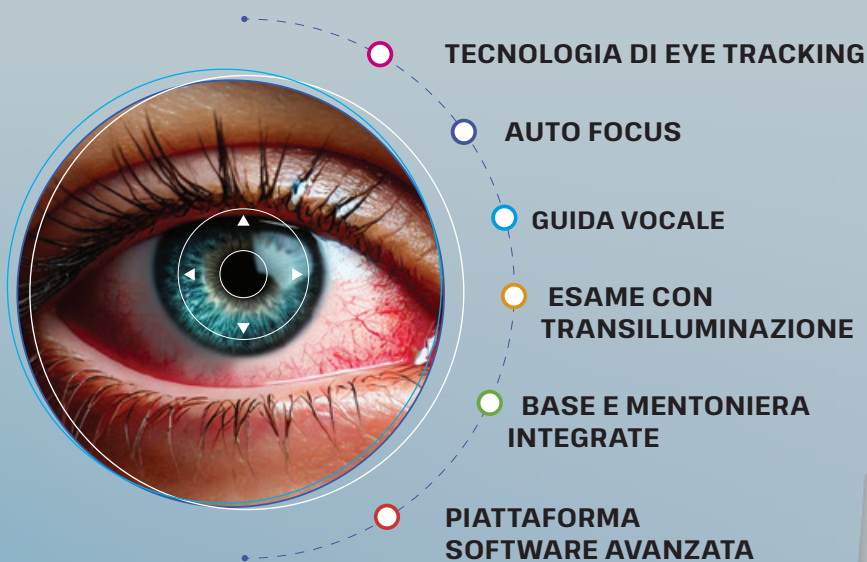

Insieme eseguono in tempo reale l'acquisizione, l'analisi e la valutazione automatica della superficie oculare.

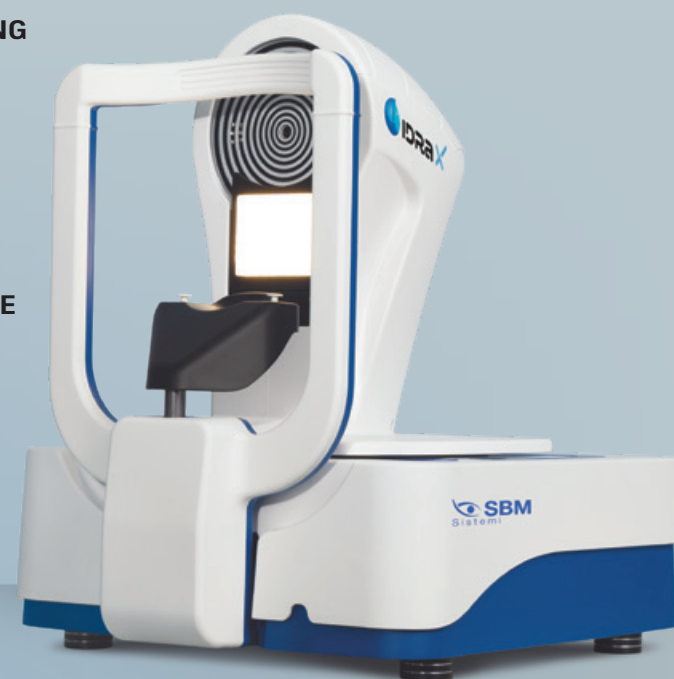

Esami

- **Interferometria**
- Altezza del menisco lacrimale
- NIBUT
- Meibografia
- **Transilluminazione MG**
- Meibografia 3D
- Rilevamento dell'ammicciamento
- Questionario sullo stile di vita
- Esame con fluorescina
- DEQ5, OSDI, OSDI6, CDEQ, CLDEQ8, SPEED
- Test di pupillometria
- Rossore bulbare
- Trattamenti
- Connessione con App del paziente
- Referti

LUCE BIANCA



INTERFEROMETRO



LUCE BLU



LUCE INFRAROSSA VICINA (NEAR IR)



Specifiche tecniche

Risoluzione immagine	8 Megapixel
Modalità di acquisizione	Scatto singolo, multiscatto, video
Messa a fuoco	Messa a fuoco manuale / automatica
Gestione ISO	Variabile
Colore immagine	Colori - Infrarosso (IR)
Fonte di illuminazione	LED a infrarossi - LED bianchi - LED blu
Distanza di lavoro	60 mm - 90 mm dal centro del placido
Uscita 1	USB 3.0
Compatibilità elettromagnetica (EMC)	IEC 60601-1-2 (2015)
Tensione di alimentazione	100 - 240 V
Tensione di esercizio del dispositivo	24 V - 5 V - 3,3 V
Dimensioni	48 cm (L) x 47 cm (A) x 40 cm (P)
Peso	12 Kg

Automazione avanzata per l'analisi del film lacrimale

La suite tecnologica IDRA X è accessibile con **una minima interazione** da parte dell'utente, offrendo prestazioni avanzate con la massima semplicità d'uso.


Una volta avviata la procedura, **IDRA X rileva e mette a fuoco automaticamente l'occhio del paziente**, seguendo protocolli guidati che garantiscono un'acquisizione ottimale dei dati.

Questa configurazione consente, quando appropriato, la delega a personale non specializzato, riducendo al **minimo il rischio di errore dell'operatore**.

IDRA X è la massima espressione di innovazione nell'analisi della superficie oculare.

Come soluzione tecnologica avanzata, **IDRA X offre una comprensione dettagliata della condizione del paziente**, includendo tipologia, gravità e classificazione dell'occhio secco, supportando la scelta di un trattamento mirato ed efficace.

I vantaggi principali di IDRA X per l'innovazione del tuo flusso di lavoro:

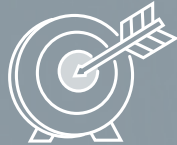Facilità d'uso 	Risparmio di tempo e riduzione del carico di lavoro del personale grazie a un sistema che gestisce automaticamente messa a fuoco e acquisizione. Il sistema rileva e mette a fuoco l'occhio del paziente in totale autonomia, eliminando la necessità di regolazioni manuali da parte dell'operatore.
Alta precisione 	La funzione automatica migliora precisione, affidabilità e ripetibilità delle misurazioni della superficie oculare e dell'occhio secco, garantendo risultati rapidi e accurati. Questo rende l>IDRA X uno strumento essenziale per cliniche e studi oftalmici.
Standardizzazione avanzata 	La ridotta necessità di interventi manuali consente una maggiore standardizzazione delle procedure, riduce la dipendenza dall'esperienza dell'operatore e favorisce una maggiore uniformità dei risultati tra esami e sessioni diverse.





Il futuro del benessere oculare.
Sicuro, rapido e redditizio.



Anticipa il mercato. Offri per primo un servizio che fa la differenza.

La tecnologia di SBM mette a disposizione un modello operativo collaudato, costruito su materiali, contenuti e strumenti concreti, pronti all'uso in clinica e online.

Sensibilizzazione online

Forniamo immagini, contenuti e filmati professionali, utilizzabili sia sui canali digitali della clinica sia sui nostri asset condivisi, per supportare l'attività di comunicazione e attrarre pazienti già informati e motivati.

Sensibilizzazione in clinica

Mettiamo a disposizione documentazione dedicata per la sala d'attesa: video per monitor e TV, materiali informativi e supporti cartacei (folder da tavolo), pensati per preparare il paziente e rafforzare il valore dell'esame prima della visita.

Continuità e relazione nel tempo

Il software Dry Eye Follow Up, fornito gratuitamente, consente di mantenere il collegamento tra paziente e professionista, supportando il follow-up, i promemoria e un percorso di cura continuativo e strutturato.

Il risultato è un approccio integrato che riduce il tempo medico, aumenta la comprensione del paziente e crea valore clinico ed economico misurabile per la struttura.

Servizi in studio



1

Sensibilizzazione online

- Informazione sulle patologie
- Preparazione del paziente prima della visita
- Nessun impiego di tempo del medico

Il paziente arriva già motivato




2

Sensibilizzazione in studio

- Materiali dedicati e chiari
- Messaggio coerente con il percorso
- Rinforzo del valore della diagnosi

Il paziente capisce perché fare l'esame

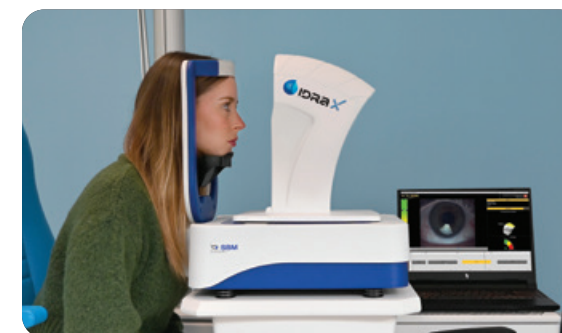

3

Valutazione

2 minuti - Full automatic


- Esame rapido, oggettivo e standardizzato
- Nessuna dipendenza dall'operatore
- Facilmente delegabile allo staff



4

Rimedio

- Soluzione coerente con la valutazione
- Percorso chiaro e spiegabile al paziente
- Valore clinico + valore economico

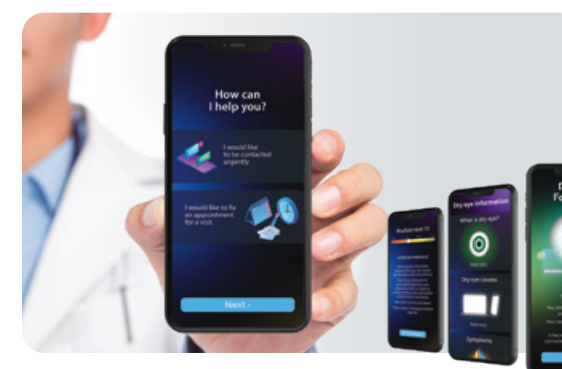

5

Mantenimento e fidelizzazione

Promemoria tramite l'App "Dry Eye Follow-Up" e consigli personalizzati per il percorso continuativo.

Percorso completo per la salute oculare

Dalla superficie oculare alle lenti a contatto, ogni trattamento è **personalizzato sulle esigenze del paziente**, **il mercato della superficie oculare è diventato centrale** nella pratica clinica moderna.

Non è più limitato al solo occhio secco, ma rappresenta un percorso trasversale che coinvolge numerose aree cliniche e terapeutiche.

Oggi è **un fattore chiave di qualità, sicurezza e continuità** in molte attività della clinica.



Chirurgia & Follow-up

Controllo oggettivo della superficie oculare prima e dopo la chirurgia refrattiva e della cataratta

Terapie croniche

- Glaucoma
- Colliri
- Superficie oculare

Lenti a contatto

- Scelta
- Idoneità
- Comfort
- Continuità d'uso

Trattamenti e integrazione

- Dry Eye
- Terapie di supporto

Terapia palpebrale


- Iniezioni di Collagene
- Blefaroplastica

Activa: migliora il benessere dei tuoi occhi

Activa è un dispositivo per il benessere oculare pensato per offrire un sollievo efficace e immediato ai disturbi dell'occhio secco. Questa condizione, molto diffusa, è nella maggior parte dei casi legata alla disfunzione delle ghiandole di Meibomio, fondamentali per la stabilità del film lacrimale.

Il sistema Activa utilizza una **tecnologia thermo-pulse che combina calore controllato a 42°C e micro-vibrazioni a 40 Hz**. In una seduta di **solì 15 minuti**, il trattamento favorisce la riattivazione delle ghiandole di Meibomio, migliorando la componente lipidica delle lacrime e riducendo sintomi come bruciore, secchezza, arrossamento e visione offuscata. Il trattamento è non invasivo, ma è indolore e rilassante e può essere eseguito in autonomia dal paziente, senza necessità di supervisione continua.

Il protocollo prevede quattro sedute iniziali nel primo mese, seguite da richiami periodici per mantenere i benefici nel tempo. **Studi clinici hanno dimostrato un miglioramento significativo dei parametri del film lacrimale e una riduzione duratura dei sintomi dell'occhio secco, senza effetti collaterali**. Facile da usare, senza consumabili e conforme alle direttive europee per le apparecchiature di benessere, Activa è adatto a studi ottici, farmacie e centri dedicati al benessere visivo. Oltre a migliorare l'esperienza del paziente, rappresenta anche un servizio sostenibile e redditizio, con costi di gestione ridotti e un rapido ritorno dell'investimento.

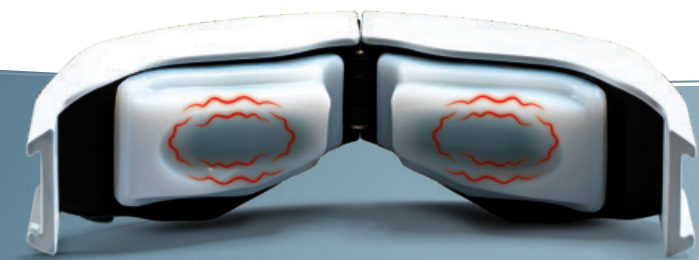

**Tecnologia
thermo - pulse**




Analisi della superficie oculare - Dry Eye Suite

La suite Dry Eye più veloce e completa

Lo studio della Tear Film and Ocular Surface Society ha definito come analizzare la superficie oculare per diagnosticare la sindrome dell'occhio secco.

IDRA X consente un'analisi completa seguendo le linee guida in modo completamente automatico e oggettivo, fornendo i risultati senza intervento dell'operatore, rendendo così l'esame estremamente rapido e facilmente delegabile.

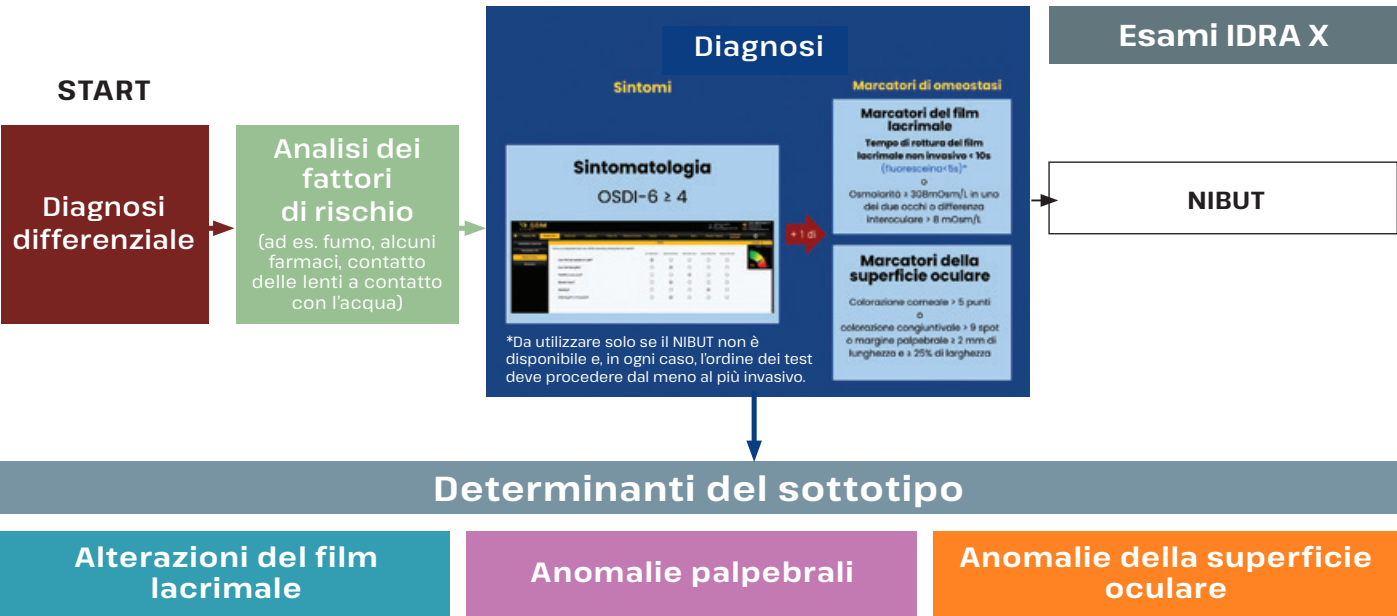

Anomalie palpebrali

Forfora cilindrica

Orifici ghiandolari

Ghiandole di Meibomio troncate

Ostruzione degli orifici delle ghiandole di Meibomio (capping)

Perdita delle ghiandole di Meibomio

Squame untuose

Cheratinizzazione del margine palpebrale (si evidenzia con verde di lissamina)

Teleangectasia

Test dei driver eziologici

Ammiccamento/chiusura palpebrale

Ammiccamento incompleto

Blefarite anteriore

Biomicroscopia palpebrale - aspetto untuoso (seborroico) o desquamativo (stafilococcico)

Base delle ciglia - forfora cilindrica Demodex

Disfunzione ghiandole di Meibomio

Orifizi ghiandolari protrusi, assenti o dislocati

Capacità secretoria delle ghiandole di Meibomio

Meibografia - ghiandole troncate o dilatate, riduzione/assenza ghiandolare (drop-out)

Teleangectasia

Cheratinizzazione del margine palpebrale

Esami IDRA X

Qualità dell'ammiccamento automatico

Blefarite

Demodex

Meibografia 3D

Alterazioni del film lacrimale

Strato lipidico

Fase muco-acquosa

Glicocalice

Cornea

Film lacrimale

Lipidico

Spessore dello strato lipidico del film lacrimale / Interferometria

Capacità secretoria delle ghiandole di Meibomio

Qualità del meibum

Acquoso

Spessore del menisco lacrimale

Meniscometria / Test di Schirmer / Test del filo rosso al fenolo

Mucina / glicocalice

Colorazione con verde di Lissamina / Rosa bengala

Citologia tramite impressione congiuntivale

Esami IDRA X

Interferometria

Altezza automatica del menisco lacrimale

Verde Lissamina

Anomalie della superficie oculare

Danno cellulare (colorazione della congiuntiva bulbare con verde di lissamina)

Iperemia congiuntivale bulbare

Ectropion

Pterigio

Nervi corneali

Danno cellulare (colorazione del lid wiper con verde di lissamina nella epiteliopatia)

Danno cellulare (colorazione corneale con fluoresceina)

LIPCOF / congiuntivocalasi

Test dei fattori eziologici

Disallineamento anatomico

Biomicroscopia, ad es. pterigio, LIPCOF / congiuntivocalasi, ectropion / entropion, lagofalmo

Disfunzione neurale

Sensibilità corneale

Microscopia confocale in vivo

Danno / alterazione cellulare

Cornea (fluoresceina)

Congiuntiva bulbare (verde di lissamina)

Epiteliopatia del "lid wiper" (verde di lissamina)

Inflammation / stress

Iperemia congiuntivale bulbare

Marker infiammatori

Esami IDRA X

Esame generico

Staining Verde Lissamina

Rosso bulbare

Meibografia: stato delle ghiandole di Meibomio

IDRA X rivela lo stato di salute delle ghiandole di Meibomio come mai prima d'ora.

Acquisisce immagini nitide e ad alta risoluzione grazie a tecnologie infrarosse avanzate, visualizzando e valutando l'architettura delle ghiandole con una chiarezza senza precedenti.


Immagine in infrarosso

Le ghiandole di Meibomio sono responsabili della produzione della componente lipidica del film lacrimale e la loro alterazione è strettamente correlata allo sviluppo dell'occhio secco evaporativo.

Valutarne sia lo stato strutturale che quello funzionale è quindi fondamentale per comprendere l'origine del disturbo.

La meibografia consente di visualizzare l'architettura delle ghiandole, per intuire la reale capacità secretoria residua e di definire il potenziale di recupero funzionale.


IDRA X offre una visione dettagliata e facilmente interpretabile anche dal paziente.

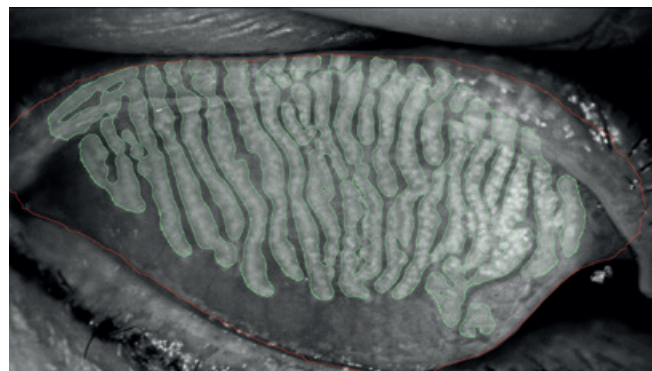

Transilluminazione palpebrale

Cosa distingue IDRA X?


La sua **funzione a infrarossi con transilluminazione**, progettata per rivelare dettagli critici spesso non rilevati, consente di visualizzare disfunzioni delle ghiandole, accumuli di olio e cambiamenti vascolari.

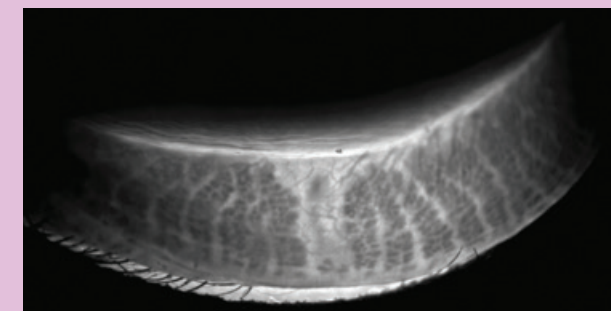


Meibografia 3D

La rivoluzionaria introduzione dell'imaging 3D delle ghiandole di Meibomio offre due grandi vantaggi.

In primo luogo, consente di **confermare la presenza di ghiandole anomale** rispetto a un soggetto sano in una visualizzazione tridimensionale; in secondo luogo, fornisce **un'immagine chiara da condividere con i pazienti**, per aiutarli a comprendere la possibile causa del loro disagio.

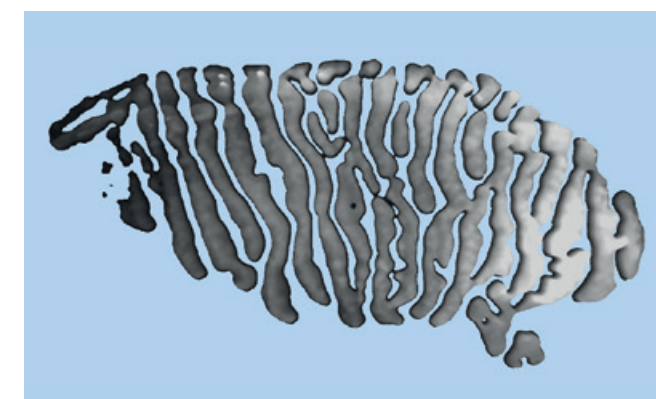

Il sistema di meibografia di IDRA X fornisce solide evidenze a supporto della scelta della terapia, aiutando il paziente a comprendere perché sia necessaria la soluzione.

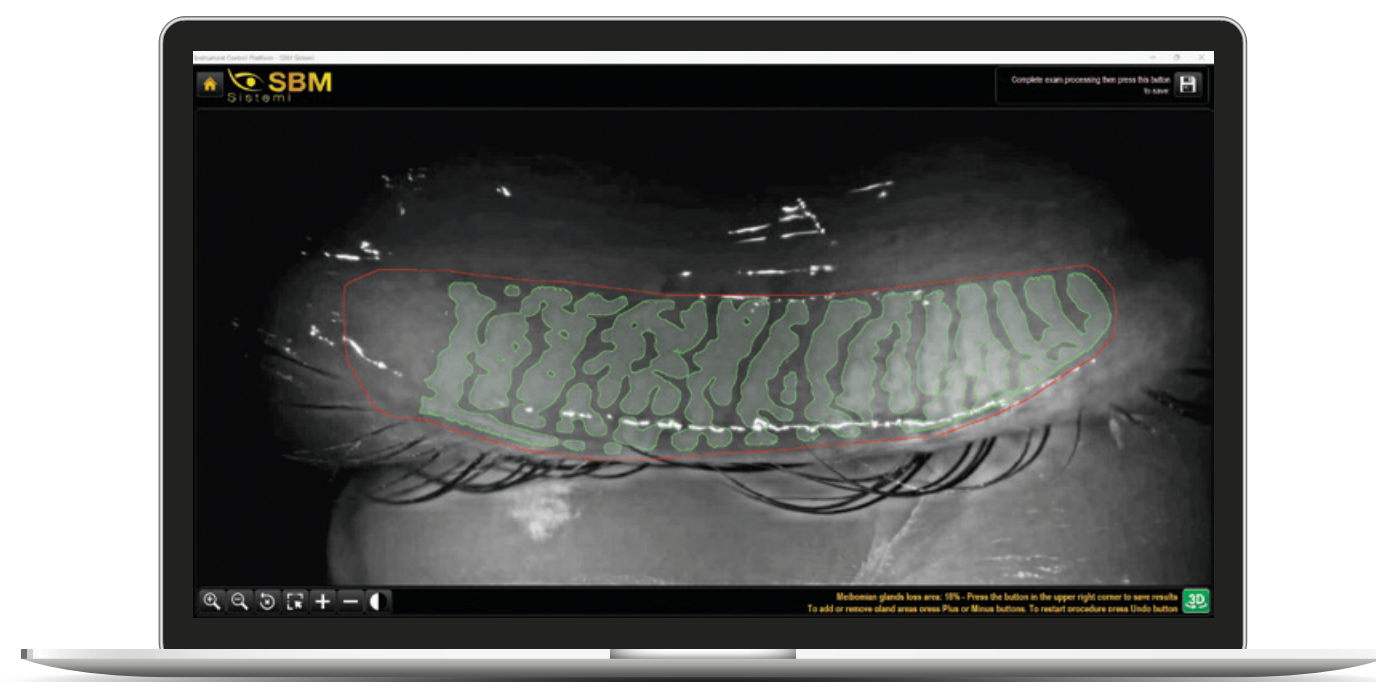

Interferometria


I meccanismi evaporativi dominano l'occhio secco

Secondo TFOS DEWS III, l'instabilità del film lacrimale e la disfunzione dello strato lipidico rappresentano meccanismi centrali della Dry Eye Disease, poiché l'occhio secco evaporativo costituisce la forma più diffusa a livello mondiale. Questo significa che la valutazione dello strato lipidico del film lacrimale non è più opzionale, ma **essenziale**.

L'interferometria automatica fornisce una valutazione diretta e oggettiva dello strato lipidico, consentendo al professionista di identificare il reale driver eziologico alla base dei sintomi.

Poiché **la maggior parte dei trattamenti per l'occhio secco è mirata all'evaporazione e alla DGM** decisioni terapeutiche prive dell'analisi dello strato lipidico risultano intrinsecamente incomplete.

L'interferometria automatizzata porta questo esame a un nuovo standard. Grazie alla **messa a fuoco automatica, acquisizione automatica e analisi automatica**, l'esame diventa riproducibile, indipendente dall'operatore e adatto al follow-up, in pieno allineamento con l'approccio moderno ed evidence-based promosso da TFOS DEWS III.

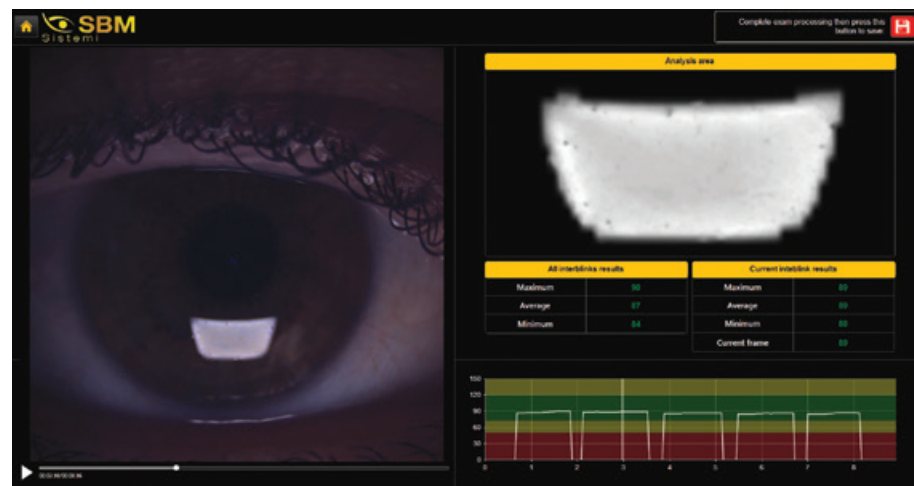

Perché l'interferometria automatica è fondamentale

- **Valutazione oggettiva** dello strato lipidico
- **Identificazione dell'occhio secco evaporativo e dell'instabilità legata alla MGD**
- **Risultati standardizzati e ripetibili**, indipendenti dall'operatore
- **Supporta la scelta terapeutica guidata dall'eziologia**
- **Ideale per il monitoraggio dell'efficacia del trattamento nel tempo**

Questo trasforma l'interferometria da semplice osservazione qualitativa a un vero strumento oggettivo.




Pupillometria

Con IDRA X è possibile misurare rapidamente e con precisione tutti i dati necessari per le lenti a contatto multifocali, bifocali e toriche.

L'esame di pupillometria acquisisce immagini o video nello spettro della luce bianca e infrarossa e consente di misurare la dimensione della pupilla e la sua decentrata in varie condizioni di illuminazione (visione scotopica, mesopica, fotopica).

Si tratta di un metodo semplice e veloce per misurare la dimensione della pupilla dei pazienti in differenti condizioni di illuminazione. Questa opzione non solo supporta l'adattamento delle lenti multifocali, ma è utile anche per la misurazione della zona ottica prima di interventi di chirurgia refrattiva o cataratta.

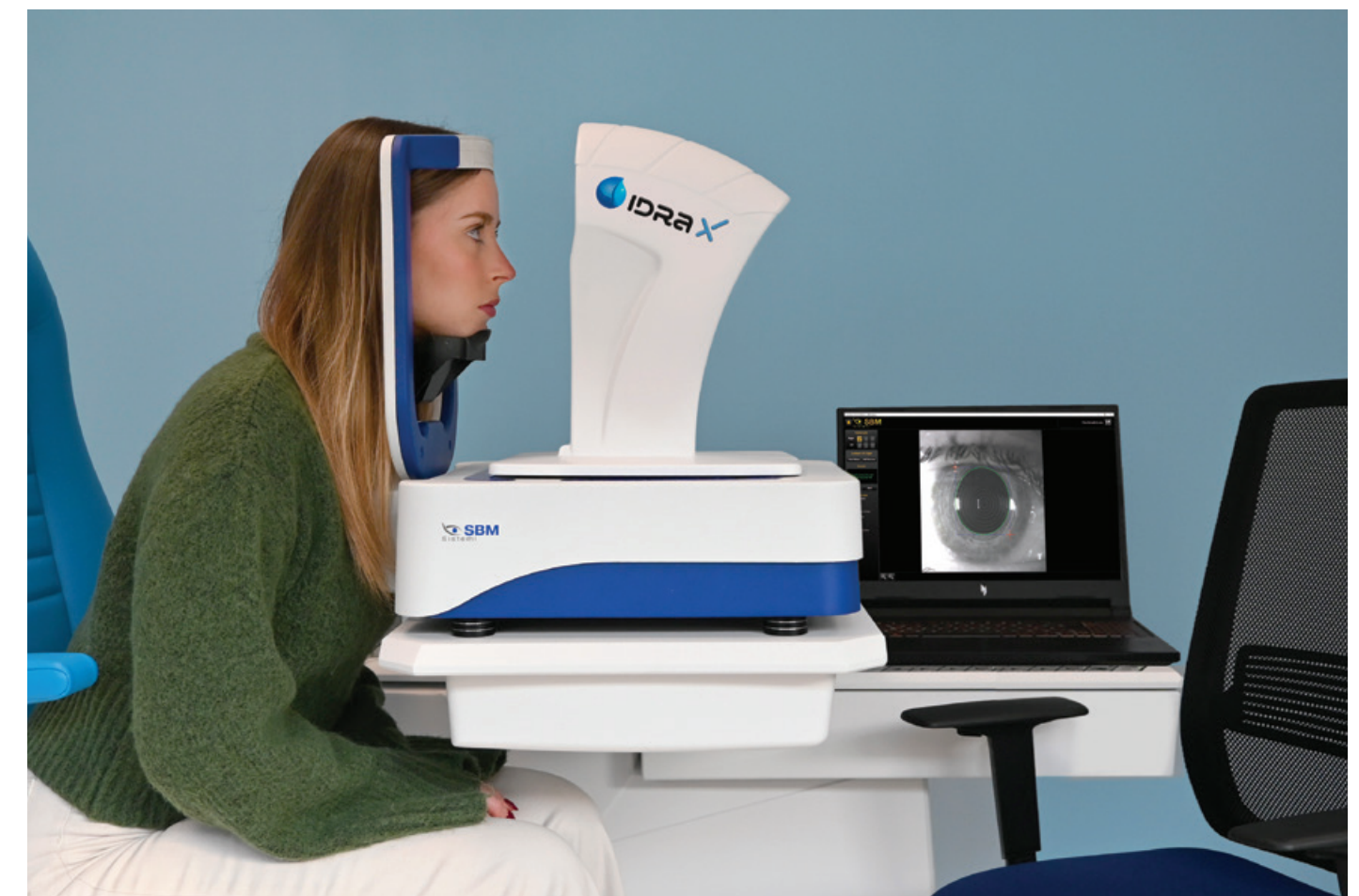


NIBUT: stabilità del film lacrimale

La stabilità del film lacrimale è un indicatore centrale della salute della superficie oculare. Un film lacrimale instabile si rompe rapidamente dopo l'ammiccamento, esponendo l'epitelio corneale e contribuendo alla comparsa dei sintomi.

Il NIBUT (Non-Invasive Break-Up Time) consente di valutare quanto a lungo il film lacrimale rimane integro evitando esami invasivi.

IDRA X esegue il NIBUT in modo automatico, analizzando il comportamento del film lacrimale su tutta la superficie corneale e restituendo parametri chiari e facilmente confrontabili nel tempo.

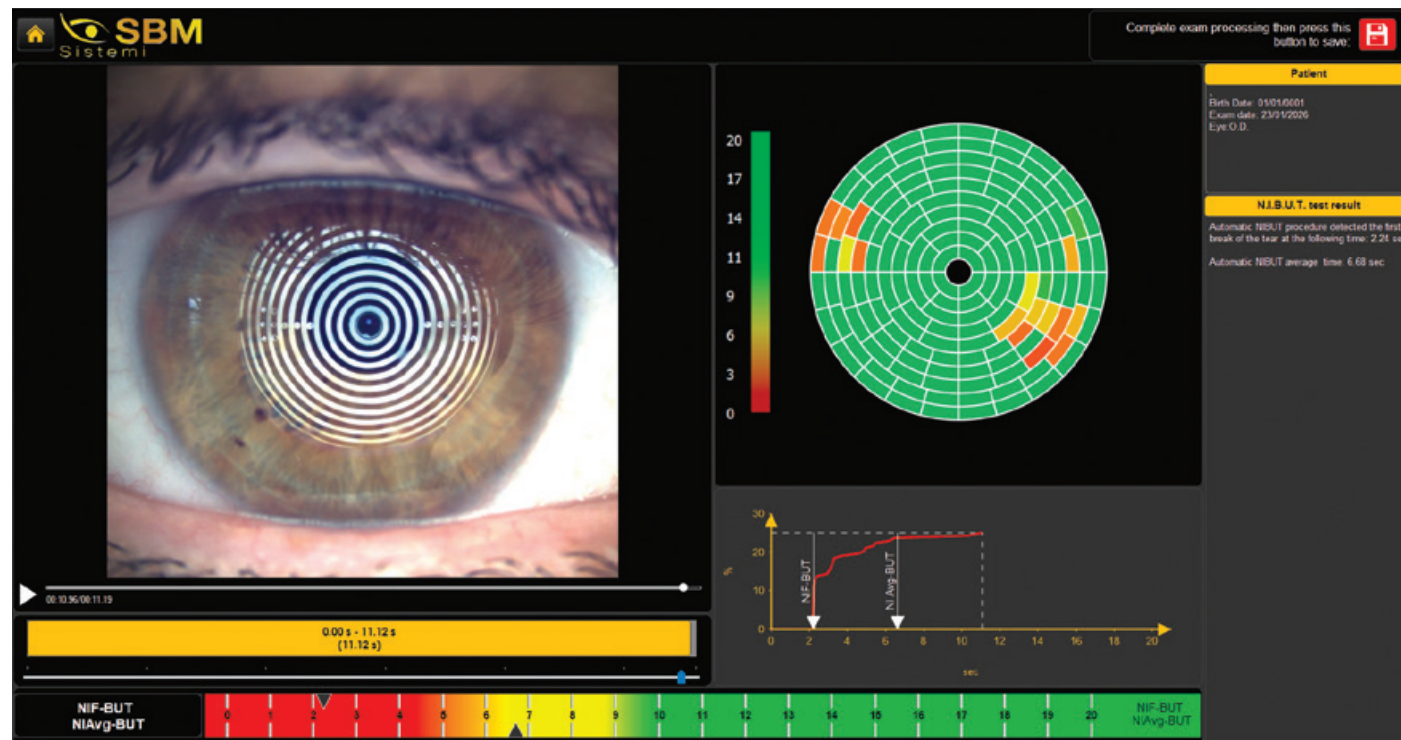


Menisco lacrimale: volume della componente acquosa

Il volume lacrimale rappresenta un elemento essenziale per la protezione e il nutrimento della superficie oculare. Il menisco lacrimale, visibile lungo il margine palpebrale, fornisce indicazioni dirette sulla quantità di film lacrimale disponibile.

La valutazione del menisco lacrimale consente di distinguere le forme di occhio secco caratterizzate da una ridotta disponibilità di lacrime, contribuendo alla corretta classificazione del disturbo e alla scelta del trattamento più appropriato.

Con IDRA X l'altezza del menisco lacrimale viene rilevata automaticamente, garantendo misurazioni rapide e coerenti.

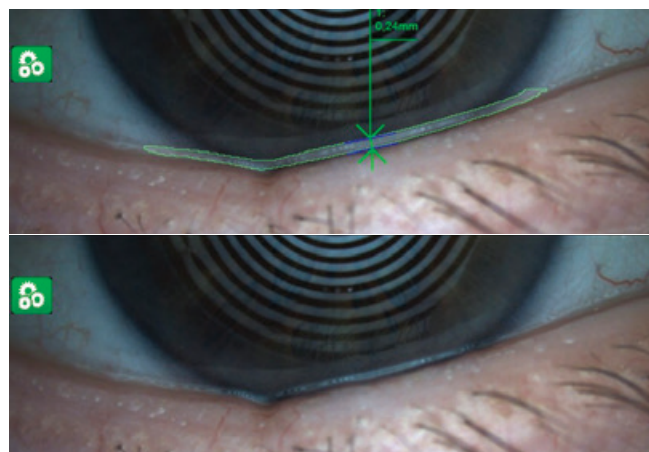


Qualità dell'ammiccamento: stimolazione delle ghiandole

L'ammiccamento svolge un ruolo fondamentale nella distribuzione uniforme del film lacrimale e nello svuotamento delle ghiandole di Meibomio. Alterazioni nella completezza dell'ammiccamento possono compromettere la stabilità del film lacrimale.

La valutazione della qualità dell'ammiccamento permette di identificare comportamenti visivi o funzionali che contribuiscono al peggioramento dell'occhio secco, come l'ammiccamento incompleto o ridotto.

IDRA X analizza automaticamente la dinamica dell'ammiccamento, fornendo informazioni utili per comprendere il ruolo funzionale delle palpebre nella patologia.

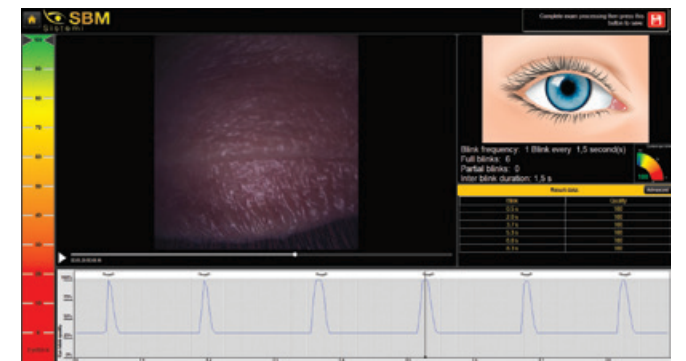


Staining: documentare il danno epiteliale

Lo staining della superficie oculare rappresenta un passaggio fondamentale nella valutazione dell'integrità epiteliale. Alterazioni del film lacrimale e stress ambientali possono determinare danni cellulari.

La colorazione consente di evidenziare le aree di sofferenza dell'epitelio corneale e congiuntivale, fornendo informazioni essenziali per distinguere l'occhio secco da altre condizioni con sintomatologia simile e per valutarne la gravità.

IDRA X consente di acquisire e archiviare immagini di staining, rendendo possibile il confronto nel tempo e il monitoraggio della risposta al trattamento.

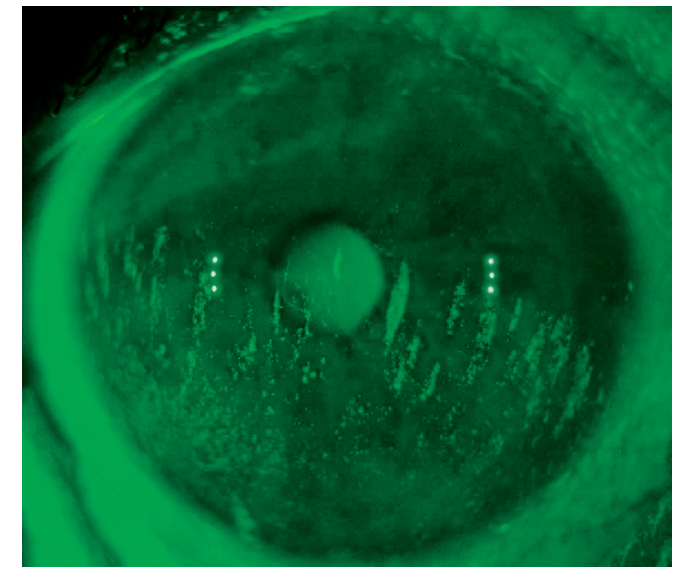


Verde lissamina: colorazione congiuntivale e palpebrale

Nella gestione dell'occhio secco, la valutazione della superficie oculare non può limitarsi alla sola cornea. La congiuntiva e il margine palpebrale possono mostrare segni precoci di sofferenza cellulare.

Lo staining con verde lissamina consente di evidenziare cellule stressate, danneggiate o devitalizzate della congiuntiva e delle palpebre, offrendo una visione più completa dello stato della superficie oculare. Questo esame è particolarmente utile nelle forme croniche ed evaporative, in cui il coinvolgimento congiuntivale può precedere o superare quello corneale.

IDRA X consente l'acquisizione delle immagini con verde lissamina, permettendo di ottenere immagini chiare e confrontabili nel tempo.

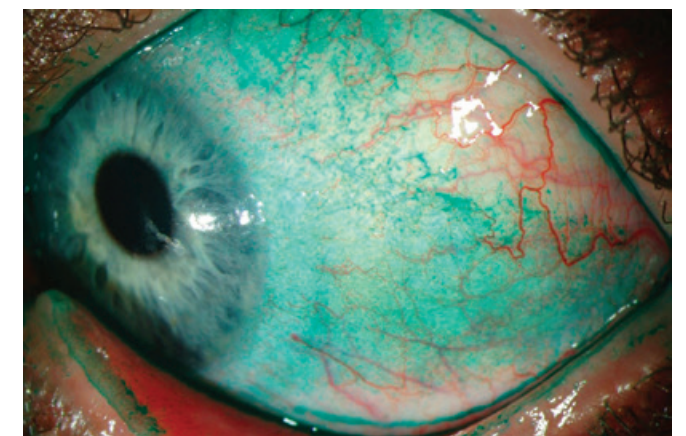


Rossore bulbare: infiammazione della superficie oculare

Il rossore bulbare rappresenta un segno clinico rilevante nelle patologie della superficie oculare ed è spesso correlato a processi infiammatori persistenti. La sua presenza, distribuzione e intensità forniscono indicazioni utili sullo stato della congiuntiva e sul grado di coinvolgimento infiammatorio.

La valutazione del rossore consente di distinguere condizioni transitorie da situazioni croniche e di monitorare l'evoluzione della patologia nel tempo. Questo è particolarmente importante nella gestione dell'occhio secco e delle condizioni associate, in cui l'infiammazione può sostenere o amplificare i sintomi riferiti dal paziente.

Con IDRA X l'immagine della congiuntiva bulbare viene acquisita in modo strutturato e confrontata con scale di classificazione riconosciute.

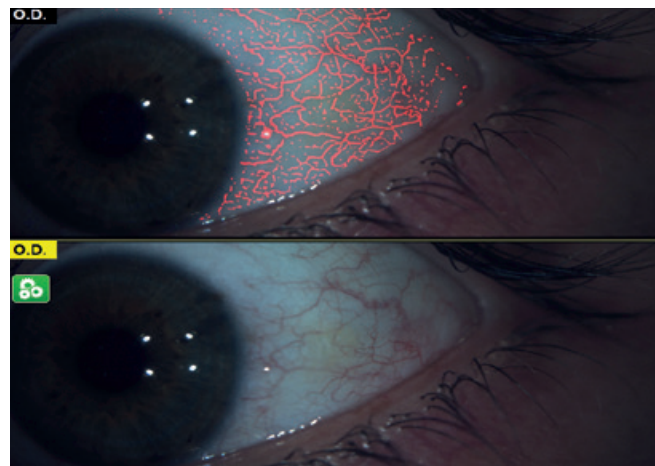


Blefarite: infiammazione del margine palpebrale

Le patologie del margine palpebrale rappresentano un sintomo frequente di alterazione del film lacrimale e discomfort oculare. La presenza di forfora cilindrica e di segni di blefarite indica un'infiammazione cronica che può anche interferire con la funzione delle ghiandole di Meibomio.

L'osservazione accurata del margine palpebrale consente di identificare accumuli, squame e alterazioni delle ciglia, elementi che contribuiscono all'instabilità del film lacrimale e alla progressione della patologia.

IDRA X permette di documentare in modo chiaro l'aspetto del margine palpebrale, facilitando l'identificazione della blefarite e il monitoraggio dell'efficacia dei trattamenti dedicati.

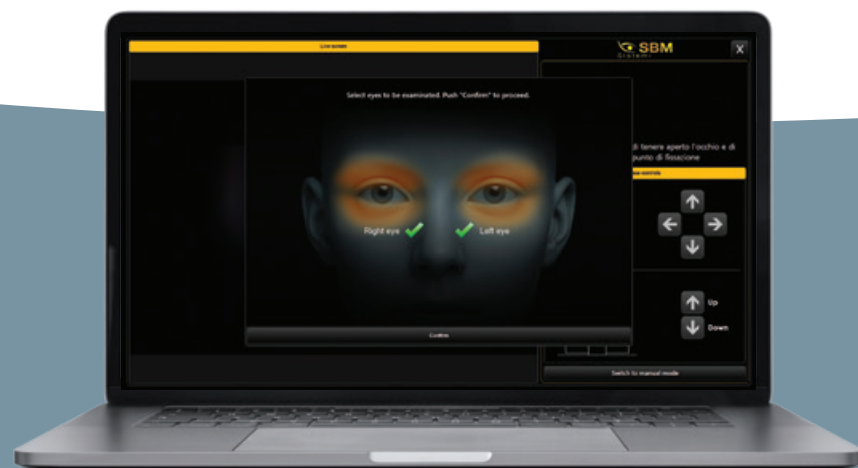

Demodex: parassita nel discomfort oculare

Il Demodex è un acaro microscopico presente sulla cute umana che può colonizzare il margine palpebrale. In caso di infestazioni significative, la sua presenza è associata a infiammazione, alterazioni delle ciglia e sintomi persistenti di irritazione oculare.

La valutazione del Demodex è importante soprattutto nei pazienti con blefarite recidivante o scarsamente responsiva ai trattamenti convenzionali.

IDRA X consente di visualizzare e documentare i segni clinici associati alla presenza di Demodex, supportando una valutazione più completa e mirata.


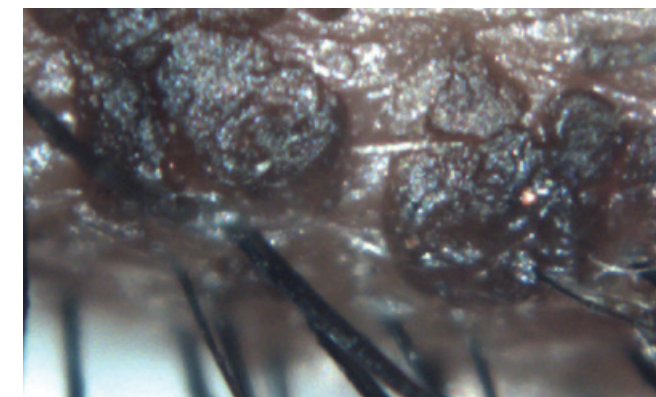


Tabelle comparative (Efron / CCLRU / Jenvis): classificare i segni per una comunicazione chiara

La presenza di rossore congiuntivale e limbare rappresenta un segno clinico frequente nelle patologie della superficie oculare. Una corretta interpretazione dell'intensità e della distribuzione del rossore è fondamentale per inquadrare la condizione del paziente e per monitorarne l'evoluzione nel tempo.

Le scale di classificazione Efron, CCLRU e Jenvis permettono di confrontare l'aspetto clinico del paziente con riferimenti standardizzati.

Con IDRA X le immagini vengono acquisite e possono essere confrontate con le tabelle di riferimento, integrando la classificazione all'interno del referto.

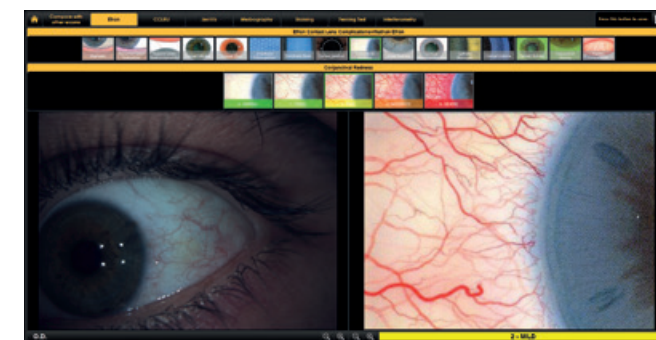

Referti occhio secco



Il software è una piattaforma dedicata all'occhio secco e consente, oltre ad aiutare nella classificazione delle patologie, di stampare e salvare referti medici, offrendo al paziente informazioni complete.

Per la soddisfazione del cliente, è spesso consigliabile fornire documentazione tecnica relativa agli esami eseguiti. Grazie ai vari referti stampabili del dispositivo SBM, si ha la possibilità di spiegare visivamente e illustrare in modo semplice la situazione patologica. Inoltre, è possibile mostrare come la patologia sia cambiata nel tempo.



Il "Daily report" raggruppa tutti i risultati degli esami del paziente effettuati in un'unica giornata. Sono disponibili diverse opzioni di visualizzazione, con o senza immagini degli esami.

Il "Follow-up report" può mostrare al paziente i benefici della terapia, evidenziando il miglioramento dei sintomi legati alla patologia dell'occhio secco.

Select a report type below to print out

Daily report

Exam report

Protocol report

Treatments report

Follow up report

Binocular exam report

All reports

Single date

From - To date

Date

02/03/2022 (2)

Daily report

Protocol report

Treatments report

DX

SX

Graph

Daily

NIBUT

Blink

BUT

Lipid L.

Meniscus

MG Loss

Schirmer

Bleph.

Staining

OSDI

DEQ5

CDEQ

Osmol.

B. redness

MRD

Notes

Select all

Print all reports

Show both eyes

Save PDF

Go to App section

Watch a video tutorial

SBM


DryEyeFollowUp for Android and iOS.

Stay in touch with your patient by downloading the app on the patient phone. Once downloaded enable the communication in the "App" section.

Il "Treatments report" elenca tutti i trattamenti prescritti al paziente.

L'opzione "All reports" consente di stampare una cartella contenente fino a 16 pagine.

Quando il paziente sostiene personalmente i costi, ricevere un referto dettagliato e multipagina rappresenta un valore aggiunto e aumenta la soddisfazione.

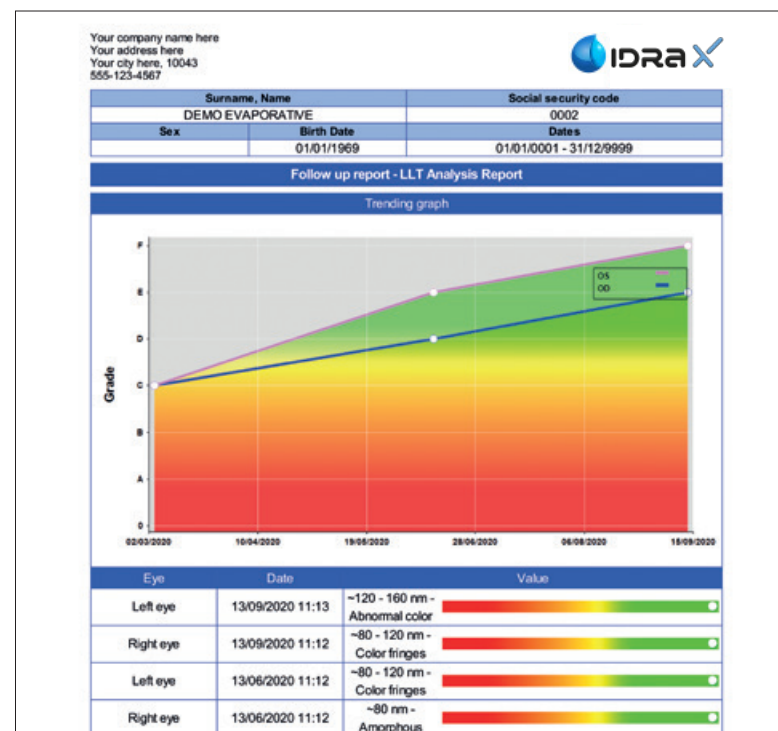

Your company name here
 Your address here
 Your city here, 10043
 555-123-4567



Surname, Name		Social security code	
DEMO EVAPORATIVE		0002	
Sex	Birth Date	Date	
	01/01/1969	13/06/2023	
Treatments			
 Eye Drops - Both eyes Treatment start date: 13/06/2023. 2 drops 4 times a day. Duration: 90Days.			
 SBM Activa mask - Both eyes Thermo-pulse technology Treatment start date: 13/06/2023. Dates: 20/06/2023, 27/06/2023, 04/07/2023, 29/08/2023, 24/10/2023			

Protocollo di trattamento

Il software offre molteplici soluzioni versatili studiate con cura per supportare i professionisti medici e gli utenti nel complesso compito di assegnare la terapia:

Automatico

Suggerimento del trattamento

L'esclusivo algoritmo integrato, sviluppato in collaborazione con il dott. Luca Vigo dello Studio Medico Carones, può fornire un approccio terapeutico dedicato basato sui risultati dell'analisi.

Personalizzato

Assegnazione automatica del trattamento

Ogni utente può personalizzare il proprio protocollo (rendendo possibile delegare la valutazione a un assistente).

Ciascuna delle opzioni fornisce referti completi, dedicati e stampabili.



Manuale

Gestione del trattamento

Attraverso la scheda **Treatment managing**, il software consente al medico di compilare il database con tutti i trattamenti disponibili nello studio. Marca e tipologia del trattamento possono essere caricati nel software e prescritti ai pazienti con due click.

App per il paziente

Dry Eye Follow-Up è un'app per lo smartphone del paziente che consente di ricevere i risultati degli esami, la terapia e informazioni complete sulla patologia dell'occhio secco.

Benefici di Dry Eye Follow-Up

- Comunicazione rapida e semplice a doppio senso tra medico e paziente
- Condivisione accurata dei referti e aggiornamenti
- Monitoraggio dei progressi per seguire l'evoluzione dei sintomi
- Supporto nella programmazione di appuntamenti regolari e nell'interazione con la clinica
- Invio di promemoria ai pazienti e notifiche ai medici
- Accelerazione nella trasmissione delle informazioni, nella prenotazione delle visite e nell'impostazione del trattamento

Workflow IDRA X

1. Questionario personalizzato sulla sintomatologia
2. Acquisizione automatica e valutazione oggettiva dei parametri clinici
3. Suggerimenti diagnostici e terapeutici basati su protocolli integrati
4. Educazione del paziente tramite referti personalizzabili e l'applicazione mobile dedicata Dry Eye Follow-Up

Non dimenticare più i tuoi farmaci!

Imposta promemoria sul tuo smartphone per tutti i trattamenti.

L'App ti ricorderà quando e come utilizzare il farmaco specifico consigliato.



Scaricala su



Patient
experience



Sito web
SBM



Chi siamo



SBM Sistemi, con sede a Rivalta di Torino, è leader nella progettazione e produzione di dispositivi diagnostici avanzati per l'oftalmologia umana e veterinaria.

Grazie a un costante impegno in ricerca, innovazione e design user-friendly, offriamo soluzioni integrate e affidabili per la gestione completa del segmento anteriore.



www.sbmsistemi.com

Via Coazze, 4 - 10040 Rivalta (Torino) Italy
Tel. +39.011.19923378 - info@sbmsistemi.com